

CU-SPT
Versie 1.00E

AED Trainer

i-PAD **CU-SPT**

Gebruiksaanwijzing



ICU Medical Systems, Inc.



CU Medical Systems, Inc.

Inhoudsopgave

Overzicht	3
1. Inleiding	4
1.1 Beschrijving van het apparaat	4
1.2 Onderdelen	4
1.3 Aanvullende informatie	4
2. Kenmerken van het apparaat	5
3. Voorbereiding voor gebruik	7
3.1 Inhoud van het standaardpakket	7
3.2 Gereedmaken van de i-PAD CU-SPT	9
3.3 Opslag van het apparaat	10
4. Gebruik van de i-PAD CU-SP101.....	11
4.1 Scenario-instelling	11
4.1.1 Scenarioselectie.....	11
4.1.2 Scenario	12
4.2 Infrarood Afstandsbediening	13
4.2.1 Infrarood Afstandsbediening	13
4.2.2 Knopfuncties infrarood afstandsbediening	14
4.3 Procedures voor gebruik van de i-PAD CU-SPT	15
5. Na gebruik van de i-PAD CU-SPT.....	19
5.1 Apparaatinstellingen	19
5.1.1 Instellen van CPR-aanwijzingen.....	19
5.1.2 De CPR-aanwijzingen instellen	19
6. Voorzorgsmaatregelen	21
7. Service voor het apparaat	22

Overzicht

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de i-PAD CU-SPT.

i-PAD CU-SPT is een trainingsproduct dat is ontwikkeld voor oefening op een semiautomatische externe defibrillator.



WAARSCHUWING

- Het apparaat is bedoeld voor instructie en training met de defibrillator en moet niet worden gebruikt bij noodsituaties.

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die noodzakelijk is voor een correct gebruik van dit apparaat.

In dit document

verwijst "apparaat" naar de [CU-SPT],

verwijzen "we/wij" en "ons/onze" naar CU Medical Systems, Inc.,

Lees deze gebruiksaanwijzingen voor gebruik aandachtig door zodat een veilige, probleemloze bediening is gewaarborgd en maak uzelf vertrouwd met de bedieningsonderdelen en voorzorgsmaatregelen.

- Tijdens het gebruik van dit apparaat moet u de instructies, waarschuwingen, opmerkingen en kennisgevingen in deze gebruiksaanwijzing opvolgen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele problemen rond het apparaat die zijn veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker.
- Neem contact op met de fabrikant indien het de bedoeling is dat het apparaat wordt aangesloten op andere apparatuur dan welke wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing
- Dit apparaat mag alleen worden gerepareerd door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra van de fabrikant. Neem contact op met de fabrikant of het geautoriseerde servicecentrum van de fabrikant indien het apparaat niet naar behoren werkt.

1. Inleiding

1.1 Beschrijving van het apparaat

CU-SPT is een trainingsproduct dat is ontwikkeld voor oefening in het gebruik van een semiautomatische externe defibrillator en waarmee gebruikers worden geholpen om sneller te kunnen reageren op noodsituaties.


1.2 Onderdelen

- Het apparaat biedt acht scenario's voor het sneller reageren op noodsituaties.
- Het apparaat heeft geen extra apparaat nodig voor de instructies en is gebruiksvriendelijk.
- Het apparaat wordt aangedreven door zes AA-batterijen (wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen) en is eenvoudig te dragen.
- Gebruikers kunnen de scenario's van het apparaat in te stellen met de afstandsbediening.

1.3 Aanvullende informatie

Neem contact op met CU Medical Systems, Inc. of haar plaatselijke distributeurs voor eventuele aanvullende informatie met betrekking tot de i-PAD CU-SPT.


2. Kenmerken van het apparaat

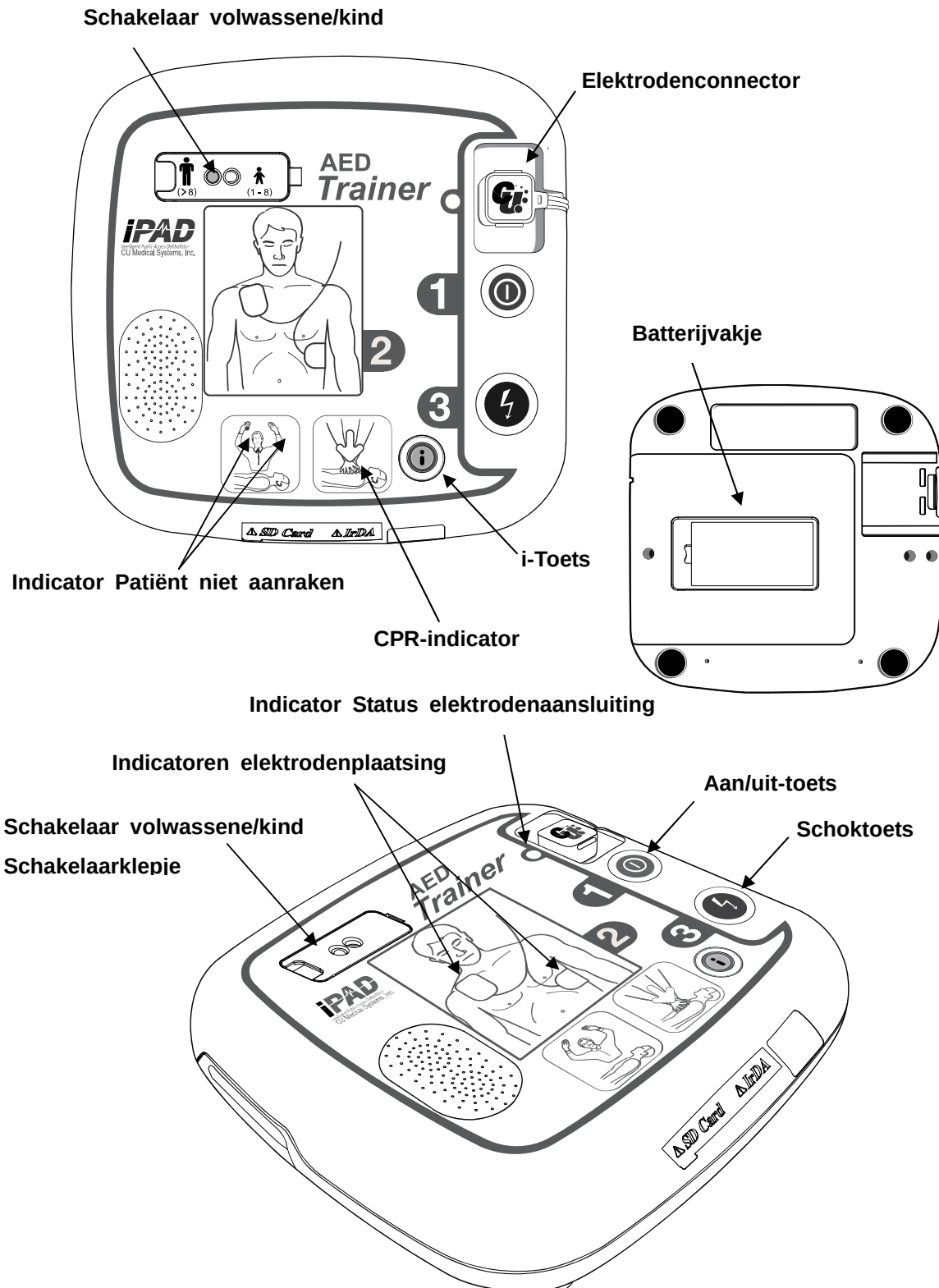


Aan/uit-toets	Om het apparaat aan en uit te zetten (wanneer het apparaat aan staat, brandt een groen lampje).
i-toets	• Beheermodus • controle van de softwareversie • instellen van de CPR-modus (aantal compressies, ademhalingen en cycli; aantal compressies per minuut; wachttijd; gedetailleerde geleiding aan/uit) • Schakelt de gesproken aanwijzingen voor CPR in of uit.
Schoktoets	Toedienen van defibrillatieschok wanneer ingedrukt terwijl de toets oranje knippert.  OPMERKING • Het apparaat dient geen elektrische schok toe
Schakelaar volwassene/kind	Schakelen tussen de modus volwassene/kind
Klepje over schakelaar volwassene/kind	Bescherming van de selectieschakelaar volwassene/kind om onbedoeld schakelen te voorkomen.
Elektrodenconnector	Aansluitpunten voor aansluiting van de elektroden.
Indicator Status elektrodenaansluiting	Weergave van de aansluitstatus van de elektrodenaansluiting.
Indicatoren voor elektrodenplaatsing	Indicatie van de plaatsing van de elektroden op de patiënt.
Indicator Patiënt niet aanraken	Waarschuwing wanneer de patiënt niet mag worden aangeraakt.
CPR-indicator	Indicatie van de uitvoering van CPR op de patiënt.
Batterijvakje	Voor de voeding van het apparaat.

3. Voorbereiding voor gebruik

3.1 Inhoud van het standaardpakket

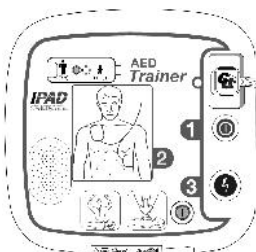

i-PAD CU-SPT

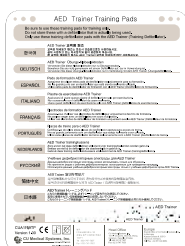

Trainingselektrode voor i-PAD CU-SPT

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik de elektroden niet voor i-PAD CU-SPT, een echte defibrillator. De elektroden kunnen geen elektrische schok toedienen.

Trainingselektrode



i-PAD CU-SPT Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing



Draagtas

Voor het vervoeren en opslaan van het apparaat

AA-batterijen

Te plaatsen in het batterijvakje

⚠ VOORZICHTIG

- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of wegwerpbatterijen met herlaadbare batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat tijdens de opslag om lekken van de batterij te voorkomen.
- Laad wegwerpbatterijen nooit opnieuw op.
- Lees bij herlaadbare batterijen alle instructies die met de batterijen en de lader zijn geleverd aandachtig door en houd u aan deze instructies.
- Verwijder oude of leeggelopen batterijen altijd direct en recycle ze of voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke afvoerregels.

⚠ OPMERKING

- De wegwerpbatterijen gaan minimaal 8 uren mee voor ononderbroken gebruik.
- Wanneer het apparaat op een koude plaats wordt gebruikt, kan dit de levensduur van de batterij verkorten.
- Als de i-knop rood wordt, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is. In dit geval moeten de batterijen door nieuwe worden vervangen.



Infrarood
Afstandsbediening

Gebruikt voor het bedienen van de CU-SPT

Batterij: 2 AAA-batterijen

- Kenmerken van het apparaat
 - Power OFF, PADS ON/OFF, Low battery-fout, Scenario's, Volumeregeling


⚠ OPMERKING

- Gebruik de bediening niet op een afstand van meer dan 5 meter van het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen waar geen infrarode straling doorkan tussen het apparaat en de bediening. Controleer de richting van de batterijen wanneer u deze plaatst. Als de batterijen niet juist zijn geplaatst, zal het apparaat mogelijk niet goed werken.

3.2 Gereedmaken van de i-PAD CU-SPT

Voer de volgende handelingen uit om de i-PAD CU-SPT gereed te maken voor gebruik

- ① Open de verpakking en controleer of alle items op de paklijst aanwezig zijn.
- ② Maak uzelf vertrouwd met kenmerken van het apparaat door raadpleging van [Hoofdstuk 2: Kenmerken van het apparaat] van deze gebruiksaanwijzing.
- ③ Plaats de AA-batterijen in het batterijvakje aan de achterzijde van het apparaat, zoals aangegeven in de figuur.

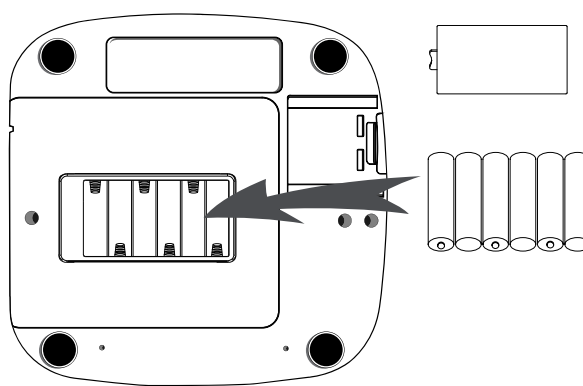

OPMERKING

- Controleer de richting van de batterijen wanneer u deze plaatst. Als de batterijen niet juist zijn geplaatst, zal het apparaat mogelijk niet goed werken.

3.3 Opslag van het apparaat

Houd bij het opslaan van het apparaat rekening met het onderstaande om beschadiging van het apparaat te vermijden.

- Bewaar het apparaat niet in omstandigheden buiten de onderstaande specificaties. Specificaties.

- **Bedieningsomgeving**

- Temperatuur: 15° ~ 35° (59° ~ 95°)

- Luchtvochtigheid: 5% ~ 95% (niet-condenserend)

- **Opslagomgeving:**

- Temperatuur: 0° ~ 43° (32° ~ 109°)

- Luchtvochtigheid: 5% ~ 95% (niet-condenserend)

- **Transportcondities**

- Temperatuur: -20° ~ 60° (-4° ~ 140°)

- Luchtvochtigheid: 5% ~ 95% (niet-condenserend)

- Bewaar het apparaat niet waar het aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen met hoge temperatuurschommelingen.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparatuur.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het aan sterke trillingen wordt blootgesteld(hoger dan hetgeen is toegestaan volgens de integriteitsnorm voor weg- en helikoptertransport MIL-STD-810G, methode 514.5C)
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge concentratie van ontvlambare gassen of anesthetica.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge concentratie van stof.
- Het apparaat mag uitsluitend worden geopend voor onderhoud door personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

4. Gebruik van de i-PAD CU-SP101

4.1 Scenario-instelling

4.1.1 Scenarioselectie

- ① Als het apparaat wordt ingeschakeld door de aan/uit-toets in te drukken, wordt standaard scenario 6 weergegeven.

- ② Als u dit scenario wilt wijzigen, Gebruik de afstandsbediening.






OPMERKING

- Raadpleeg [Paragraaf 4.1.2: Scenario] voor details.

- ③ Er zijn 8 soorten scenario
- ④ Wanneer u de i-toets indrukt, worden scenario's S1 tot en met S8 achtereenvolgens weergegeven en begeleid door gesproken instructies.
- ⑤ Wanneer het gewenste scenario wordt geselecteerd, bedient u het apparaat volgens [Paragraaf 4.3: Procedures voor gebruik van het apparaat] van deze gebruiksaanwijzing.

4.1.2 Scenario

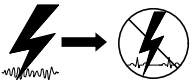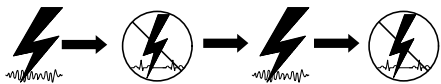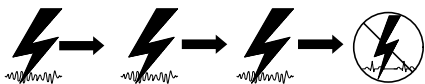Scenario 1 (S1) 	① Toediening eerste schok, CPR ② Reproductie normale ritme, CPR
Scenario 2 (S2) 	① Toediening eerste schok, CPR ② Toediening tweede schok, CPR ③ Reproductie normale ritme, CPR
Scenario 3 (S3) 	① Reproductie normale ritme, CPR ② Toediening eerste schok, CPR ③ Reproductie normale ritme, CPR
Scenario 4 (S4) 	Reproductie normale ritme continu, CPR
Scenario 5 (S5) 	① Toediening eerste schok, CPR ② Reproductie normale ritme, CPR ③ Toediening tweede schok, CPR ④ Reproductie normale ritme, CPR
Scenario 6 (S6) 	Reproductie ventrikelfibrillatie continu, CPR
Scenario 7 (S7) 	① Toediening eerste schok, CPR ② Toediening tweede schok, CPR ③ Reproductie normale ritme, CPR ④ Toediening derde schok, CPR ⑤ Reproductie normale ritme, CPR
Scenario 8 (S8) 	① Toediening eerste schok, CPR ② Toediening tweede schok, CPR ③ Toediening derde schok, CPR ④ Reproductie normale ritme, CPR

4.2 Infrarood Afstandsbediening

4.2.1 Infrarood Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunt u diverse noodsituaties reproduceren zoals Power OFF (stroom uit), PADS ON/OFF (elektroden geplaatst/niet-geplaatst), LOW BAT (batterij bijna leeg) en andere scenario's naast het regelen van het volume.



Infrarood Afstandsbediening

OPMERKING

- Let erop dat u de afstandsbediening niet kwijtraakt. Wanneer u het apparaat niet kunt bedienen met de afstandsbediening, moet u de batterijen van de afstandsbediening vervangen. Als het probleem aanhoudt nadat de batterijen zijn vervangen, moet u contact met ons opnemen.
- Gebruik de bediening niet op een afstand van meer dan 5 meter van het apparaat.
- Richt met de afstandsbediening naar het apparaat vanaf de plaats waar het apparaat zichtbaar is.

4.2.2 Knopfuncties infrarood afstandsbediening


knoppen	Knopfuncties
POWER OFF	Schakelt apparaat uit.
PADS ON/OFF	Regelt de status van de elektroden. Voert scenario 6 uit wanneer deze kop wordt ingedrukt als PADS OFF (elektroden niet aangesloten) is ingeschakeld. Schakelt naar PADS OFF wanneer deze knop wordt ingedrukt als PADS ON (elektroden ingeschakeld) is geactiveerd.
LOW BAT	Reproduceert de situatie met "batterij" bijna leeg wanneer deze knop wordt ingedrukt. De situatie met "batterij leeg" die ontstaat wanneer de i-toets wordt ingedrukt, betekent niet dat de batterij ook echt bijna leeg is.  OPMERKING • Wanneer de fout "Batterij bijna leeg" zich voordoet zonder dat op de knop "LOW BAT" is gedrukt, moeten de batterijen in het apparaat worden vervangen.
Volume Control	Met de knop ▲ wordt het volume verhoogd en met de knop ▼ wordt het volume verlaagd.  OPMERKING • Het standaardvolumeniveau op het apparaat is 7. Dit volume kan worden aangepast van 0 tot 10 met de afstandsbediening. • De levensduur van de batterij kan afnemen naarmate het volume toeneemt.
Training Scenario	De knoppen "S1 ~ S8" reproduceren noodscenario's die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Raadpleeg [Paragraaf 4.1.2: Scenario] voor details.

4.3 Procedures voor gebruik van de i-PAD CU-SPT


① Stel de selectieschakelaar volwassene/kind in op de toepasselijke stand voor het slachtoffer.

Volwassen slachtoffer

Verzekert u ervan dat de selectieschakelaar volwassene/kind in de stand Volwassene staat. Zet de schakelaar, als deze nog niet is ingesteld, in de stand Volwassene, zoals aangegeven in de onderstaande figuren.

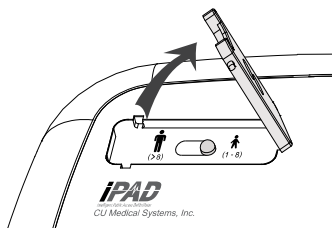


Open het klepje van de schakelaar.

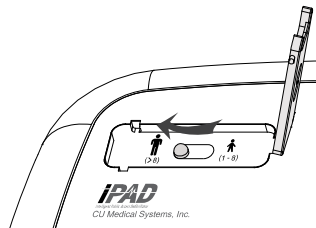


Zet de schakelaar in de stand volwassene defibrilleren, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Kind (slachtoffer weegt minder dan 25 kg of is ten hoogste 8 jaar oud)

Verzekert u ervan dat de selectieschakelaar volwassene/kind in de stand Kind staat. Zet de schakelaar, als deze nog niet is ingesteld, in de stand Kind, zoals aangegeven in de onderstaande figuren.

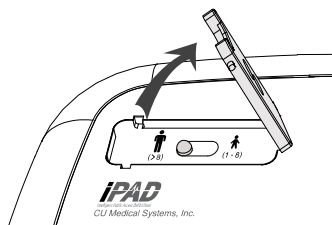

Open het klepje van de schakelaar.

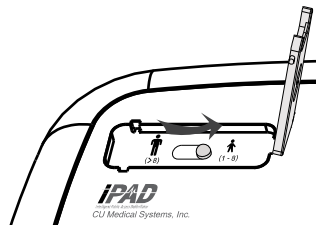

Zet de schakelaar in de stand kind defibrilleren, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

⚠ OPMERKING

- U kunt de selectieschakelaar volwassene/kind instellen voordat of nadat u de i-PAD CU-SPT inschakelt. Maar u moet deze wel inschakelen voor PADS ON. Na PADS ON kunt u de modus niet meer wijzigen. Voor een correcte werking van het apparaat is het aan te bevelen een geschikte modus te kiezen voor PADS ON.
- De selectieschakelaar volwassene/kind wordt beïnvloed door magnetische velden. Gebruik het apparaat niet in een sterk magnetisch veld.



② Zet het apparaat aan door de aan/uit-toets in te drukken.



Wanneer u de aan/uit-toets indrukt, gebeurt achtereenvolgens het volgende:

- de zoemer klinkt gedurende 1 seconde
- gesproken aanwijzing: “Bel nu het alarmnummer 112”

Open de elektroden en haal het trainingselektrodenpakket eruit.

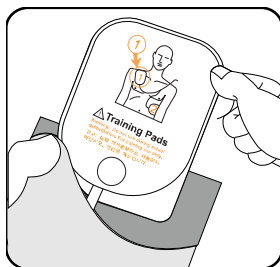
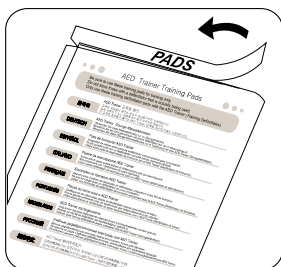


Raadpleeg de afbeeldingen op beide elektroden.




Plaats de elektroden op de pop.


- Verwijder de folie van **elektrode 1** en plak de elektrode op de borstkas van de pop, zoals hieronder getoond.

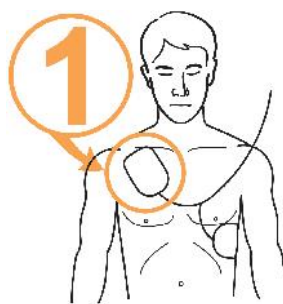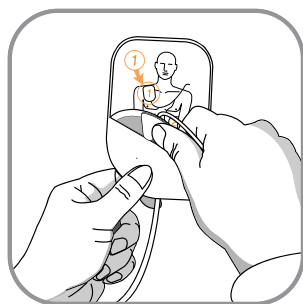

- Verwijder de folie van **elektrode 2** en plak de elektrode aan de zijkant van de romp van de pop, zoals hieronder getoond.

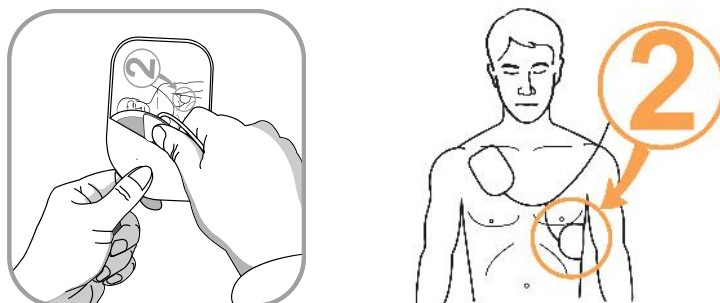

Sluit de elektrodenaansluiting aan op de elektrodenconnector op het apparaat.

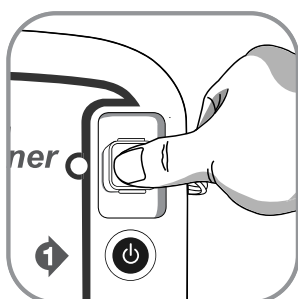

Wanneer de elektrodenconnector is aangesloten, werkt het apparaat als volgt in overeenstemming met het geselecteerde scenario:

Nadat het apparaat is opgeladen worden achtereenvolgens de volgende indicatoren geactiveerd:



- het apparaat meldt dat een defibrillatieschok nodig is en vraagt uit de buurt van de pop te blijven.
- aanhoudende pieptoon terwijl de schoktoets oranje knippert;
- het apparaat draagt u op de knipperende oranje schoktoets in te drukken; druk de schoktoets op dat moment in.

Op het moment dat de schoktoets wordt ingedrukt, dient het apparaat een defibrillatieschok toe aan de pop. Als de defibrillatie naar behoren wordt uitgevoerd, meldt het apparaat dat een elektrische schok is toegediend. Nadat de schok is toegediend, geeft het apparaat aan dat u de patiënt mag aanraken. Het lampje van de CPR-modus gaat branden. Vervolgens starten de gesproken aanwijzingen voor CPR.

Als de knipperende schoktoets niet binnen 15 seconden wordt ingedrukt, annuleert het apparaat de toediening van de schok en wordt de schoktoediening uitgeschakeld. Vervolgens geeft het apparaat instructies voor CPR.

Als de patiënt geen defibrillatie nodig heeft, doet het apparaat achtereenvolgens het volgende:

- het apparaat meldt dat de patiënt geen defibrillatieschok nodig heeft en dat u de pop mag aanraken.
- de indicator CPR-modus gaat branden.
- de gesproken aanwijzingen voor CPR beginnen.

Ⓢ **Voer CPR uit.**

Voer CPR uit wanneer de i-PAD CU-SPT u daartoe opdraagt.

Standaard geeft de CU-SPT gesproken aanwijzingen voor CPR tijdens de CPR-onderbreking nadat een schok is toegediend. Als u gesproken aanwijzingen voor CPR wilt buiten de standaardinstelling, moet u de blauwe i-Toets ten minste 15 seconden ingedrukt houden.

Raadpleeg het plaatselijk trainingsprogramma voor details over CPR.

 OPMERKING

- De CPR-aanwijzingen kunnen in een beheerdersmodus worden gezet. Zie [Paragraaf 5: Apparaatinstellingen] voor meer informatie.

5. Na gebruik van de i-PAD CU-SPT

5.1 Apparaatinstellingen

5.1.1 Instellen van CPR-aanwijzingen

De standaardinstelling voor CPR op de CU-SPT is 5 cycli van 30 borstcompressies en 2 beademingen, in overeenstemming met de CPR-richtlijnen van de American Heart Association (AHA) uit 2010. U kunt deze instellingen echter aanpassen.

U kunt de volgende instellingen verrichten:


- Aantal borstcompressies
- Aantal beademingen
- Aantal cycli
- Aantal borstcompressies per minuut
- Wachtijd
- Selectie van gedetailleerde aanwijzingen

5.1.2 De CPR-aanwijzingen instellen

- ① Als u de i-Button in de stand stand-by ten minste 1 seconde ingedrukt houdt, schakelt het apparaat over naar de beheerdersmodus met gesproken aanwijzingen.
- ② Het apparaat geeft u een overzicht (softwareversie).
- ③ Wanneer u wordt gevraagd de CPR-aanwijzingen in te stellen, drukt u op de i-toets om over te schakelen naar de modus voor het instellen van de CPR-aanwijzingen.
- ④ Wanneer u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren, voert u **het ingestelde wachtwoord** in.

⚠ OPMERKING

- Wachtwoord: druk achtereenvolgens de volgende toetsen in:
- **i-Toets → i-Toets → Schoktoets → i-Toets → Schoktoets → Schoktoets**

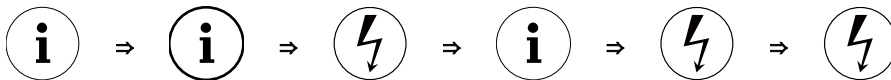

- ⑤ De stem geeft informatie over de huidige instellingen voor CPR-aanwijzingen.
- ⑥ Druk op de schoktoets om de instelling te wijzigen of druk op de i-Toets om verder te gaan met de volgende stap.
- ⑦ De instellingen kunnen worden gewijzigd in de volgende volgorde: aantal borstcompressies, aantal beademingen, borstcompressiesnelheid, wachtijd en selectie van gedetailleerde aanwijzingen. Raadpleeg [Tabel 1] Instellingsopties voor CPR-aanwijzingen hieronder
- ⑧ Wanneer de instelling is voltooid, geeft de stem informatie betreffende de ingestelde CPR-

aanwijzingen. Deze kunnen worden opgeslagen of geannuleerd.

- ⑨ Druk op de i-Toets om de instellingen op te slaan, of op de schoktoets om de instellingen te annuleren, zoals aangegeven in de gesproken aanwijzingen.
- ⑩ Nadat de instellingen voor de gesproken CPR-aanwijzingen zijn opgeslagen of geannuleerd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

[Tabel 1] Instellingsopties voor CPR-aanwijzingen

Nummer	Instellingsoptie	Bereik	Eenheid	Standaard	Omschrijving
1	Aantal borstcompressies	15, 30	15	30	Voer 30 compressies uit.
2	Aantal beademingen	0 tot 2	1	2	Dien tweemaal beademing toe.
3	Aantal cycli	2 tot 10	1	5	Voer 5 cycli uit van borstcompressie en beademing.
4	Borstcompressie-snelheid	100 tot 120	5	100	Voer borstcompressie uit met een snelheid van 100 compressies per minuut.
5	CPR-wachttijd	30 tot 180 sec.	30 sec.	120 sec.	Wacht 120 seconden (2 minuten).
6	Selectie van gedetailleerde aanwijzingen	Aan/Uit		Uit	In- en uitschakelen van gedetailleerde gesproken aanwijzingen voor borstcompressie en beademing tijdens het uitvoeren van CPR.

⚠️ OPMERKING

- Standaard staan de gedetailleerde aanwijzingen tijdens CPR uit, zodat u zich kunt concentreren op de compressiesnelheid en beademingsaanwijzingen. Als u gedetailleerde aanwijzingen wilt laten geven tijdens CPR, zet u deze instelling op Aan zoals op de voorgaande pagina's beschreven.
- Als de gedetailleerde aanwijzingen UIT staan en het aantal kunstmatige beademingen op 0 is ingesteld, geeft de CU-SPT alleen gedurende 2 minuten aanwijzingen voor borstcompressie. Na de 2 minuten gaat de CU-SPT automatisch door naar de volgende reeks.

6. Voorzorgsmaatregelen

In deze gebruiksaanwijzing wordt door middel van de onderstaande termen de nadruk gelegd op de veiligheidsprocedures en voorzorgsmaatregelen die moeten worden gehanteerd bij het gebruik van het apparaat. Maak uzelf vertrouwd met de waarschuwingen, opmerkingen en verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik van het apparaat te waarborgen. Het bedrijf en haar geautoriseerde distributeur zijn niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die door de gebruiker of de patiënt worden opgelopen als gevolg van kennelijke nalatigheid of onjuist gebruik door de gebruiker.

WAARSCHUWING

- Omstandigheden, risico's en onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of die levens kunnen kosten.

VOORZICHTIG

- Omstandigheden, risico's of onveilige handelingen die kunnen leiden tot licht of middelmatig persoonlijk letsel, schade aan het apparaat, of verlies van behandelingsgegevens die in het apparaat zijn opgeslagen, met name als de beschreven voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.

OPMERKING

- Items die van belang zijn tijdens de installatie, de bediening of het onderhoud van het apparaat.

7. Service voor het apparaat

Garantie voor het apparaat

Naam van het apparaat		Modelnaam	
Handelsnaam		Serienr.	
Distributeur		Verantwoordelijke	

- CU Medical Systems, Inc. garandeert dat dit apparaat vrij is van gebreken in materiaal en constructie gedurende twee volle jaren vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Tijdens de garantieperiode zullen we een apparaat dat blijkt defect te zijn zonder kosten repareren of, als wij daarvoor kiezen, vervangen, mits u het apparaat op eigen kosten retourneert naar ons of onze geautoriseerde vertegenwoordiger.
- Deze garantie is niet van toepassing indien het apparaat is beschadigd door een ongeluk of door verkeerd gebruik, of als gevolg van modificaties door anderen dan CU Medical Systems, Inc. of haar geautoriseerde vertegenwoordigers. IN GEEN GEVAL IS CU MEDICAL SYSTEMS AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE.
- Uitsluitend apparaten met serienummers en de bijbehorende accessoires vallen onder de dekking van deze garantie. FYSIEKE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERKEERDE BEHANDELING OF VANDALISME WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. Voorwerpen als kabels en modules zonder serienummer worden niet gedekt door deze garantie.

Afwijzing van garantie

De garantie vervalt in de volgende omstandigheden:

- Reparatie door niet-geautoriseerd personeel.
- Verbreking van het fabriekszegel zonder autorisatie van CU Medical Systems, Inc.
- Storingen of schade als gevolg van een val of externe schokken na aankoop.
- Schade door natuurrampen, brand, aardbevingen, overstromingen, bliksem en dergelijke.
- Storingen of schade door milieu-invloeden of abnormale spanningsniveaus.
- Schade veroorzaakt door opslag in omstandigheden buiten de gespecificeerde limieten.
- Storingen als gevolg van het opraken van verbruiksartikelen.
- Storingen als gevolg van het binnendringen van zand en/of vuil in het apparaat.
- Willekeurige wijziging van de aankoopdatum, naam van de klant, naam van de distributeur, partijnummer en andere geregistreerde gegevens.
- Ontbreken van een aankoopbewijs bij het garantiebewijs.
- Gebruik van toebehoren en onderdelen die niet voor de fabrikant zijn aanbevolen.
- Andere storingen of schade ontstaan door onjuist gebruik.

Service

- De i-PAD CU-SPT mag alleen worden gerepareerd door geautoriseerd personeel.

- De i-PAD CU-SPT wordt gedurende de garantieperiode kosteloos gerepareerd. Na de garantieperiode worden de kosten voor materiaal en arbeidsloon gedragen door de gebruiker.
- Breng de i-PAD CU-SPT als deze niet naar behoren werkt onmiddellijk ter reparatie naar een geautoriseerd servicecentrum.
- Vul bij een reparatieverzoek in de onderstaande tabel de gevraagde gegevens in.

Service en technische ondersteuning

Website

<http://www.cu911.com>

Online ondersteuning

www.cu911.com → Customer Service → Online Support


CU Medical Systems/Klantenservice

5F, Cheonggye Building, 221, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82 31 421 9700 / Fax: +82 31 421 9911

Europa

Geautoriseerd EU-vertegenwoordiger van CU Medical Systems, Inc.
Medical Device Safety Service Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Duitsland
TEL: +49 511 6262 8630
FAX: +49 511 6262 8633

Filiaal van CU Medical Systems, Inc. in Duitsland
Ernst-Augustin-Str.5-11, 12489 Berlin-Adlershof, Duitsland
TEL / FAX: +49 511 848 6054

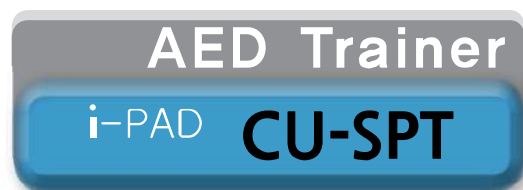

[Hoofdkantoor/fabriek]

Dongwha Medical Instrument Complex
130-1, Donghwhagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si,
Gangwon-do, 220-801 Republiek Korea
Tlfn: +82 33 747 7657
Fax: +82 33 747 7659
Website: www.cu911.com

[Verkoopkantoor]

5F, Cheonggye Building, 221, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tlfn: +82 31 421 9700
Fax: +82 31,421 9911



CU Medical Systems, Inc.
www.cu911.com